



Ультразвукове чищення  
згідно з останніми законами.

# Elmasonic Med \*



**Elmasonic Med – це серія ефективних ультразвукових очисних пристроїв, пов'язаних з надійним попереднім очищенням медичних, стоматологічних та хірургічних інструментів та імплантатів. З ультразвуковою частотою 37 кГц можна видалити навіть найважче забруднення.\*\***

**Очисні пристрої Elmasonic Med, що підходять для різних застосувань, мають об'єм баків від 3 до 90 літрів (лише Med 30 без зливу). Спеціальна хімія прибирання, розроблена компанією Elma разом із практичними аксесуарами, такими як кошики, підставки для лотків тощо, забезпечують найкращі результати очищення.**

\* \* Elmasonic Med принципово НЕ замінює препарат у пристрої для чищення та дезінфекції.

## Розроблено для

Медичні центри • Лікарні • Стоматологічні практики  
• Центральні відділи стерильного постачання • Стоматологічні лабораторії • Студії татуювання та пірсингу • Салони по догляду за ногами



## Очищає

Хірургічні, медичні або стоматологічні інструменти • Протези та імплантати • Інструменти з галузей ортопедії, татуювання та пірсингу



## Видаляє

Залишки крові, тканин і кісток • Жири • Виділення • Очистки зубів • Зубний камінь • Базалеві відкладення • Альгінати та штукатурки • Шліфувальні та полірувальні пасти • Віск • Флюс • Цементи • Мозолі та залишки шкіри • Інші забруднення



### Чистий



#### Сумісний з MDR

Пристрої Elmasonic Med зареєстровані як медичні вироби класу I відповідно до директиви МЛУ (ЄС) 2017/745.



#### Чистий дизайн

Поверхні з нержавіючої сталі легко миються; дисплей і мембранну клавіатуру можна витерти. Сучасний дизайн вражає.

### Розумний



#### 5 індивідуальних ультразвукових режимів

дегазація: швидка дегазація  
есо: Тихий, енергоефективний, тривалий термін служби пристрою: Більш послідовний ультразвуковий імпульс очищення: Для найпотужнішої динаміки забруднення: Автоматична зміна між імпульсом та розгорткою для ще кращих результатів очищення



#### Збережіть власні програми

Чотири окремі програми очищення можна зберегти в меню та активувати за допомогою швидкого вибору - для надійних процесів та відтворюваних результатів очищення.

### Легко



#### Інтуїтивно зрозумілий та орієнтований на користувача

Чіткий та легкорозбірливий дисплей дозволяє просто і точно встановлювати параметри очищення.



#### Відгук від пристрою

Користувач постійно оновлюється робочим станом завдяки дисплеям та попереджувальним повідомленням, наприклад, в кінці чищення або при досягненні граничної температури.

### Безпечний




#### Розумна технологія

Граничну температуру можна встановити індивідуально. Це допомагає запобігти денатурації білка. Цінні інструменти захищені та ідеально очищені.



#### Захист користувачів

Пластикова кришка забезпечує більш тихе робоче середовище внаслідок зменшення робочого шуму. Він також служить практичним піддоном для крапель для кошика та деталей після очищення.

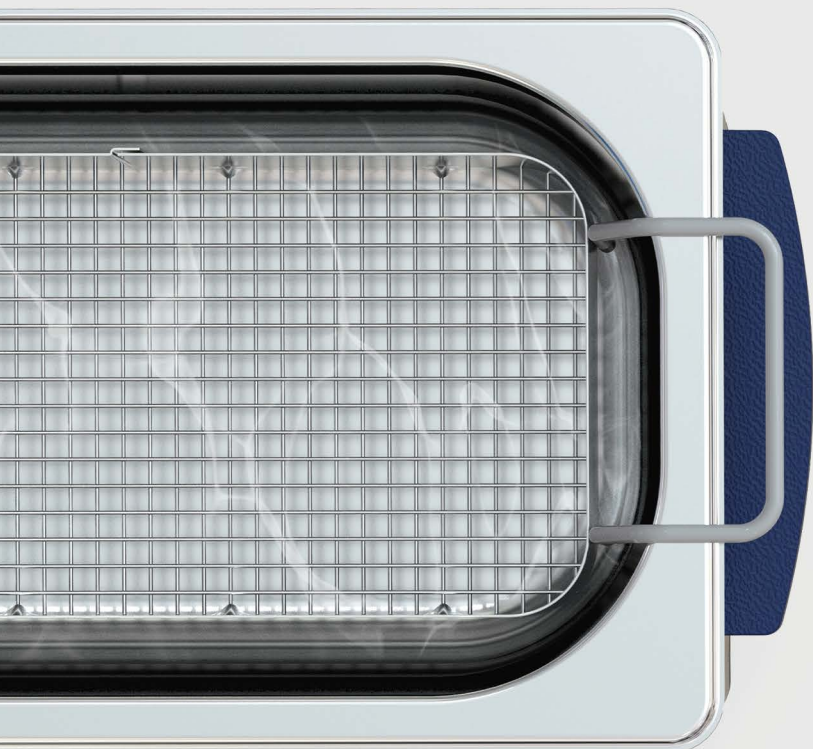

**Elma Schmidbauer GmbH**  
**Gottlieb-Daimler-Str. 17**  
**78224 Зінген (Німеччина)**  
**[www.elma-ultrasonic.com](http://www.elma-ultrasonic.com)**

Можливі технічні та оптичні зміни.  
Elmasonic Med\_EN\_07\_20

\* Медичний продукт класу 1 відповідно до МДР  
(ЕС) 2017/745. Дотримуйтесь законів та  
правових норм, що діють у вашій країні.